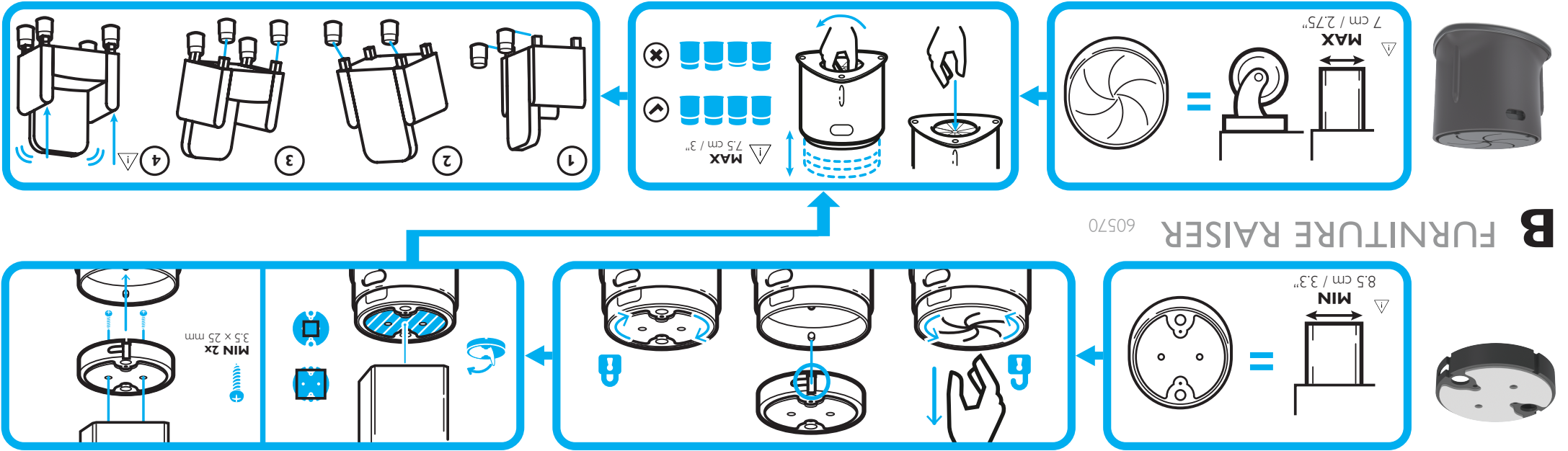
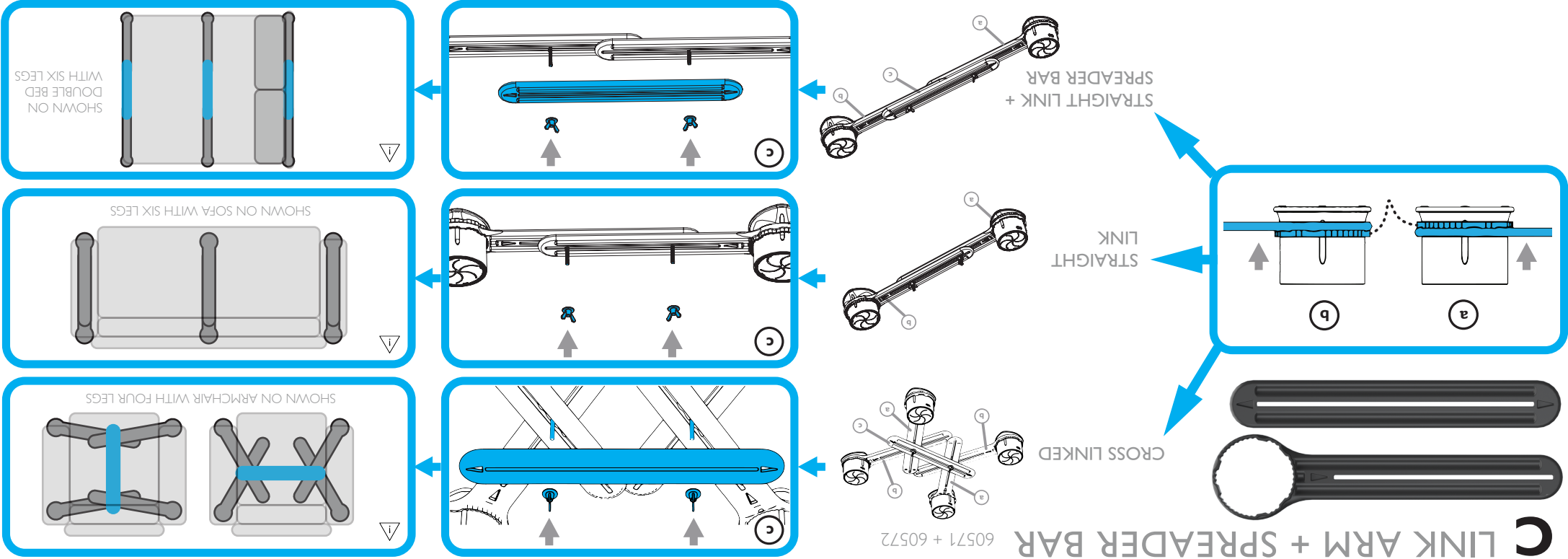




BG

АКО ИЗПОЛЗВАТЕ ПОВДИГАЧИ SUREGRIP НА ТЪВЪР ПОД, ПОСТАВЕТЕ ДОСТАВЕНИТЕ ТРИ ЛЕПИЛИНИ КРАЧЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА. АКО КРАКАТА НА МЕБЕЛИТЕ СА 8.5 CM ИЛИ ПОВЕЧЕ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОМПОНЕНТА „БЛОЧЕН АДАПТЕР“, СЛЕДВАЙТЕ (А) ОТЗАД, АКО КРАКАТА НА МЕБЕЛИТЕ СА ПО-МАЛКИ ОТ 7 CM ИЛИ ИМАТ КОЛЕАЦА, СЛЕДВАЙТЕ (В) ОТЗАД, ЗА ДА ПРОМЕНИТЕ ВИСОЧИНАТА НА „RAISERS“; ПОСТАВЕТЕ РЪКАТА СИ В ОСНОВАТА И Я ЗАВЪРТЕТЕ ДО ЖЕЛАНАТА ВИСОЧИНА. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВСИЧКИ „РЕЙЗЪРИ“ СА С ЕДНАКВА ВИСОЧИНА. АКО ИЗПОЛЗВАТЕ „СЪЕДИНИТЕЛНИ РАМЕНА + РАЗПРЪСКВАЩА ГРЕДА“, ПЪРВО СЛЕДВАЙТЕ А ИЛИ В, А СЛЕД ТОВА С ОТЗАД, ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПОВДИГАЧИТЕ ДА СЕ СЪЕДИНЯТ ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПОВДИГАТИ МЕБЕЛИ - ВИЖЕ ПРЕПОРЪКИТЕ ОТЗАД.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ SUREGRIP РАЙЗЕРИ САМО ПОД СТАТИЧНИ МЕБЕЛИ. ТЕГЛОТО НА МЕБЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНО. АКО СЕ УДАРИ, ПРОВЕРЕТЕ ЗА СТАБИЛНОСТ. ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА СТАБИЛНОСТ ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА. ВИНАГИ ПОВДИГАЙТЕ КРАКАТА НА МЕБЕЛИТЕ НА ЕДНА И СЪЩА ВИСОЧИНА. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪРХУ НЕРАВНИ ПОВЪРХНОСТИ. ВНИМАВАЙТЕ ДА ИЗБЕГНЕТЕ ЗАКЛЕЩВАНЕ НА ПРЪСТИ В ПРОЦЕПИТЕ ЗА НАСТРОЙКА. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ, АКО НАПРЕЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ СЪПРЪЧАТ ИЗВЪН ОТПЕЧАТЪКА НА МЕБЕЛИТЕ.

A = МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ - НА ГОРНАТА ПОВЪРХНОСТ И В КЛАДЕНЕЦА.
B = ИЗБЪРЪШЕТЕ С НЕАБРАЗИВНА КЪРПА И САПУНЕНА ВОДА.

ВСЯКА СЕРИОЗНА АВАРИЯ, ВЪЗНИКНАЛА ПРИ УПОТРЕБА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОКЛАДВАНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ЕК (КЛИЕНТИ ОТ ЕС)

CS

POKUD POUŽÍVÁTE ZVEDÁKY SUREGRIP NA TVRDÉ PODLAZE, PŘED POUŽITÍM NASAŇTE TŘI DODANÉ LEPIČÍ NOŽKY. POKUD JSOU NOHY NÁBYTKU 8.5 CM NEBO VÍCE, POUŽIJTE KOMPONENT „BLOCK ADAPTER“, POSTUPUJTE PODLE (A) NA DRUHÉ STRANĚ. POKUD JSOU NOHY NÁBYTKU MENŠÍ NEŽ 7 CM, NEBO JSOU-LI NA DRUHÉ STRANĚ KOLEČKA (B). PRO ZMĚNU VÝŠKY „RAISERS“ POLOŽTE RUKU NA ZÁKLADNU A OTOČTE JI DO POŽADOVANÉ VÝŠKY. ZAJISTĚTE, ABY VŠECHNY „ZVÝŠOVAČE“ BYLY VE STEJNÉ VÝŠCE. POKUD POUŽÍVÁTE „SPOJOVACÍ RAMENA + ROZPĚRNÁ TYČ“, POSTUPUJTE NEJPRVE PODLE A NEBO B A POTÉ C NA DRUHÉ STRANĚ. PŘI POUŽÍVÁNÍ ZVEDNUTÉHO NÁBYTKU SE DOPORUČUJE, ABY BYLY ZVEDÁKY SPOJENY VE SMĚRU POHYBU - VIZ DOPORUČENÍ NA DRUHÉ STRANĚ.

ZVEDÁKY SUREGRIP POUŽÍVEJTE POUZE POD STATICKÝM NÁBYTKEM. HMOTNOST NÁBYTKU BY MĚLA BÝT ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENA. V PŘÍPADĚ KLĚPÁNÍ ZKONTROLUJTE STABILITU. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE STABILITU. VŽDY ZVEDNĚTE NOHY NÁBYTKU O STEJNOU VÝŠKU. NEPOUŽÍVEJTE NA NEROVNÉ POVRCHY. DÁVEJTE POZOR, ABY NEDOŠLO K ZACHYCENÍ PRSTŮ V NASTAVOVACÍCH ŠTĚRBINÁCH. **VAROVÁNÍ:** POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ, POKUD PŘÍČNÉ NOSNÍKY VÝCHÍVAJÍ MIMO STOPU NÁBYTKU.

A = MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE - NA HORNÍ PLOŠE A VE STUJNĚ.
B = OTRĚTE NEABRAZIVNÍ LÁTKOU A MYDLOVOU VODOU.

JAKÁKOLI VÁŽNÁ NEHODA, KE KTERÉ DOJDE PŘI POUŽÍVÁNÍ, BY MĚLA BÝT NAHLÁŠENA EC REP (ZÁKAZNÍCI V EU)

IT

SE SI UTILIZZANO I RIALZI SUREGRIP SU UN PAVIMENTO DURO, MONTARE I TRE PIEDINI ADESIVI IN DOTAZIONE PRIMA DELL'USO. SE I PIEDINI DEL MOBILE MISURANO 8.5 CM O PIÙ, UTILIZZARE IL COMPONENTE "ADATTATORE BLOCCO", SEGUIRE (A) SUL RETRO. SE I PIEDINI DEL MOBILE SONO INFERIORI A 7 CM O SONO DOTATI DI ROTELLE, SEGUIRE (B) SUL RETRO. PER MODIFICARE L'ALTEZZA DEI "RIALZI" POSIZIONARE LA MANO NELLA BASE E GIRARLA ALL'ALTEZZA DESIDERATA. ASSICURARSI CHE TUTTI I "RAISERS" ABBIANO LA STESSA ALTEZZA. SE SI UTILIZZA "LINK ARMS + SPREADER BAR", SEGUIRE PRIMA A O B, QUINDI C SUL RETRO. SI CONSIGLIA DI UNIRE LE ALZATE NELLA DIREZIONE DEL MOVIMENTO QUANDO SI UTILIZZANO I MOBILI RIALZATI - VEDERE LE RACCOMANDAZIONI SUL RETRO.

UTILIZZARE I RIALZI SUREGRIP SOLO SOTTO I MOBILI STATICI. IL PESO DEI MOBILI DEVE ESSERE DISTRIBUITO UNIFORMEMENTE. IN CASO DI URTO, VERIFICARE LA STABILITÀ. VERIFICARNE LA STABILITÀ PRIMA DI OGNI UTILIZZO. SOLLEVARE SEMPRE LE GAMBE DEI MOBILI ALLA STESSA ALTEZZA. NON UTILIZZARE SU SUPERFICI IRREGOLARI. FARE ATTENZIONE A EVITARE L'INTRAPPOLAMENTO DELLE DITA NELLE FESSURE DI REGOLAZIONE. **ATTENZIONE.** POTENZIALE PERICOLO DI INCIAMPO SE LE TRAVERSE SPORGONO DALL'INGOMBRO DEL MOBILE.

A = PESO MASSIMO DELL'UTENTE - SULLA SUPERFICIE SUPERIORE E NEL VANO.
B = PULIRE CON UN PANNINO NON ABRASIVO E ACQUA INSAPONATA.

QUALSIASI INCIDENTE GRAVE CHE SI VERIFICA ATTRAVERSO L'USO DEVE ESSERE SEGNALATO AL RAPPRESENTANTE EC (CLIENTI DELL'UE)

FR

Produit soumis à une règle de tri

Triman - Indicate recycling and sorting rules



LANGHAM SUREGRIP®

FURNITURE RAISERS, LINK ARMS + SPREADER BAR

Welcome to your new Gordon Ellis product.
We hope that it proves a useful aid in your daily life.

Your **SUREGRIP®** RAISERS were specifically developed by our UK Design Team to make furniture raising as simple as possible, and with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.

FURNITURE RAISER
60570

LINK ARM
60571

BLOCK ADAPTER
WITH ADHESIVE PAD

SPREADER BAR
60572

MAX 700 kg 1540 lbs 110 stone
PER SET OF FOUR

PH 5 - 9

DESIGNED IN THE UK

BHTA

5 PP

IFU-REF 60570/0524-1

REF 60570 + 60571 + 60572

GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY, ENGLAND DE74 2AT

EC REP
AUTHORISED REPRESENTATIVE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA

MADE IN CHINA

FOR FURTHER INFORMATION AND GUIDANCE A VIDEO CAN BE VIEWED BY SCANNING THE QR CODE, OR VISITING: GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK/SUREGRIP-2

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

gordonellis.healthcare
@EllisHealthcare

