



Sol-M™ Trubbig uppdragningskanyl

- Sol-M™ Trubbig uppdragningskanyl är utformad för att minska risken för nålsticksskada medan du drar upp och förbereder medicin. Används för uppdragning av medicin eller för att tillföra läkemedel i nållösa IV-system.

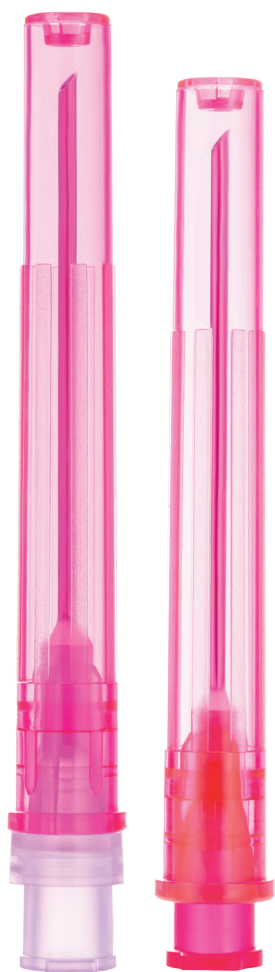

Egenskaper:

- Elimineras onödig användning av vassa kanyler
- Färgkodade hylsor för enkel identifiering
- Nålhylsan är kompatibel med alla Luer Lock- och Luer Slip Tip-sprutor
- Finns med 5-mikrons filter utformat för att förhindra uppdragning av krossade partiklar vid användning av glasampuller (REF: 110022F, 110023F)
- Innehåller ingen Latex, PVC eller DEHP

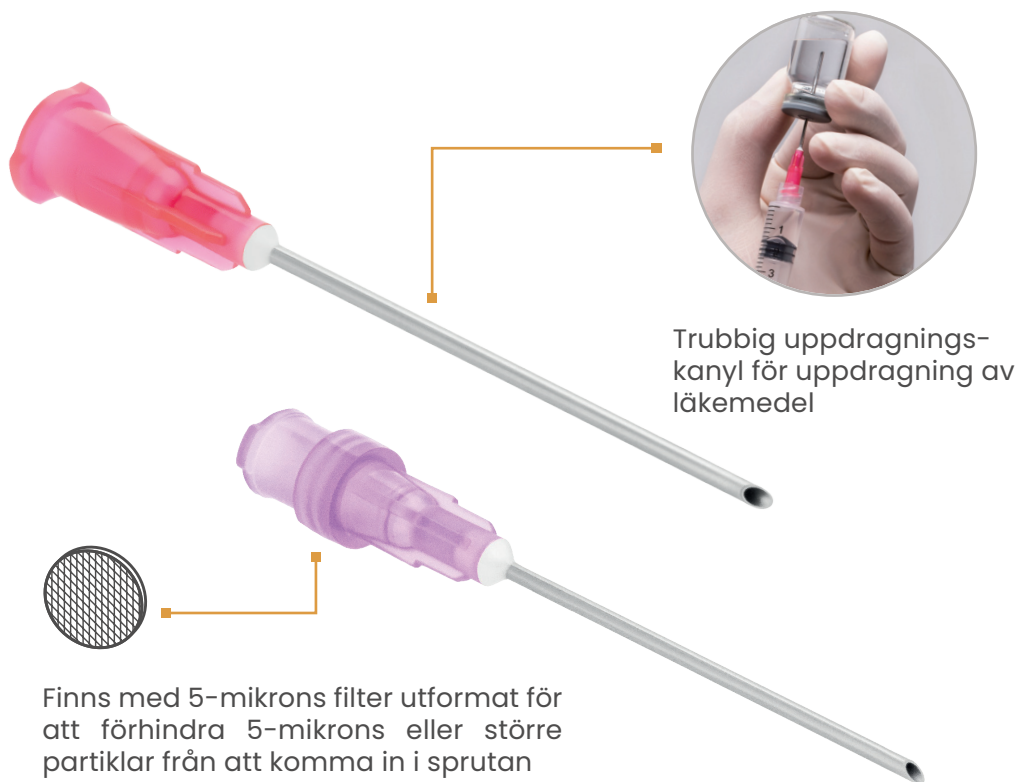

Trubbig uppdragningskanyl för uppdragning av läkemedel

Finns med 5-mikrons filter utformat för att förhindra 5-mikrons eller större partiklar från att komma in i sprutan

CE 2797

Sol - M™ Trubbig uppdragningskanyl



5-mikrons filternål kan användas med glasampuller.

Designad för att förhindra att 5-mikrons eller större partiklar från att komma in i sprutan

Obs: Om partiklar är synliga i injektionsflaskan eller ampullen rekommenderas det att kassera medicinen för att förhindra injektioner av dessa partiklar i patienten.

Sol-M™ Trubbig uppdragningskanyl

Artikel Nummer	Produkt Beskrivning	Gauge	Längd (inches)	Längd (mm)	Avd Fp	Trp FP
110021	Sol-M trubbig uppdragningskanyl 18G x 1"	18G	1"	25 mm	100	1000
110022	Sol-M trubbig uppdragningskanyl 18G x 1 1/2"	18G	1 1/2"	40 mm	100	1000
110023	Sol-M trubbig uppdragningskanyl 18G x 2"	18G	2"	50 mm	100	1000
110022F	Sol-M tr. uppdragn. kanyl m. filter 18G x 1 1/2"	18G	1 1/2"	40 mm	100	1000
110023F	Sol-M tr. uppdragn. kanyl m. filter 18G x 2"	18 G	2"	50 mm	100	1000

Kontakta Swereco (SOL-MILLENNIUM® representant) för mer information om Sol-M™ Trubbig uppdragningskanyl.

Avsedd användning: Sol-M™ Trubbig uppdragningskanyl används tillsammans med en spruta som en tillsatsanordning för aspiration från medicinflaskor med flera doser eller injektion i IV-system.

Avsedd användare: Licensierad vårdpersonal.

Varning:

- Engångsprodukt. Återanvändning eller användning om förpackningen är skadad kan leda till infektion eller annan sjukdom/skada.

Innehållet i detta material är endast riktat till och begränsat till en professionell publik (sjukvårdspersonal). Detta material är inte medicinsk rådgivning, riktlinje eller rekommendation. Innan du använder en viss produkt, läs alltid bipacksedeln, produktetiketten och/eller bruksanvisningen. Detta material distribueras av Sol-Millennium Europe Sp z o.o. med registrerad adress Twarda 18, 00-105 Warsaw, Poland, Registry Court: District Court for Warsaw, XIIth Economic Department KRS 0000434783, EU VAT: PL5252535720, Share capital: 500.000 PLN. Sol-Millennium Europe Sp. z o.o. Alla rättigheter förbehållna.

För mer information, vänligen kontakta:



Sol-Millennium Europe Sp. z o.o.
Warsaw HUB, Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warsaw, Polen

@ info.eu@sol-m.com

Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda, Sverige

@ order@swereco.com

EMEA-MD-437-0323-SE

SWERECO