

NovaSling Universal
Ortopedi • NOVA-serien

Art nr: E11, E11A, E11EA
E11K, E11RK, E11UW

NovaSling är ett universalt skulderbandage/axelslynga som kan användas för sig eller tillsammans med tre olika typer av kuddar för att positionera skuldran optimalt beroende på typ av skada eller operation. Med varje NovaSling medföljer en elastisk handträningsboll för främjande av cirkulationen.


Namn	NovaSling Universal utan kudde	NovaSling Universal med kudde
Art nr	E11	E11A
Färg	Svart	Svart
Vad ingår i förpackningen	NovaSling Universal Överdrag, slingor, band Handträningsboll	NovaSling Universal Överdrag, slingor, band Handträningsboll Abduktionskudde
Mått	B60 x L50 cm	
Material	Polyester, Nylon, ABS (spännen) PU-skum (kuddar/kilar)	
Tillbehör	art nr E11EA Extra abduktionskudde art nr E11K NovaSling kudde art nr E11RK NovaSling Rahmekudde art nr E11UW NovaSling wedge art nr E11A-BALL Cirkulationsboll (reservdel)	
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	



Symboler:



Ingen PVC eller Latex

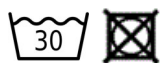

Tvätttråd



Gör alltid en visuell kontroll
innan användning



Innehåller polyester, nylon,
ABS, PU-skum



Produkten följer (EU) MDR
2017/745 och 2007/47/
EG för medicintekniska
produkter.



Art nr E11, E11A, E11EA,
E11K, E11RK, E11UW

NovaSling Universal består av en universalslinga samt 3 olika typer av kuddar; standardkudde som ger abduktion till ca 15 gr, wedge som ger en neutralställning av underarmen utan abduktion, samt Rahmekudden som används efter kuff- och protesoperationer. Både till standardkudden och wedgen kan en extra kudde appliceras om ökad abduktion önskas



Standardkudde, delbar för
justering av abduktionsvinkeln, primär indikation: rotatorcuff suturer

Wedge, primärt
vid stabiliseringar

Rahmekudden för postoperativ behandling vid kuff- och protes operationer



Vid produktfel eller i händelse av ett tillbud, kontakta Swereco



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda



NovaSling Universal
Ortopedi • NOVA-serien

Art nr: E11, E11A, E11EA,
E11K, E11RK, E11UW

Användaranvisning



Placera armen i slingan med remmen fäst runt skuldran och fronten av slingan helt öppen. Armbågen ska placeras så långt bak i slingan som möjligt.

Längden på slingan justeras beroende på armlängden genom att vika bak fronten och fästa den vikta delen med de två dubbelsidiga kardborrefästena.



Fäst bandet A så att armen förhindras att glida i slingan. Fäst skulderbandet B med det Y-formade kardborrebandet nära handleden. Justera skulderbandet till önskad position.

Fäst bandet C som går runt kroppen för att minska rotationen. Om abduktionskudde eller wedge ska användas så vänta med detta band till sist.



Placera kudden eller wedgen i midjelinjen och fäst den mot armslingan med kardborrefästena. Spänn kudden med midjebandet. Kudden ger en abduktion om ca 15°. Genom att flytta kudden fram eller bak kan önskad intern- eller externrotation fås.

Fäst bandet D som går bakom nacken så att skulderbandagets tryck mot nacken avlastas.

De två korta lösa velcrobanden kan med fördel användas till att fixera armbågen enligt punkt 2(A), eller för att till exempel minska slingans omfång.



Tips: för att avlasta axeln kan axelbandet fästas i midjebandet istället för i slingan.