

SOL-CARE®

## Luer Lock säkerhetspruta

SOL-CARE™ luer lock säkerhetspruta är konstruerad så att man förhindrar stickskador och återanvändning av kanylen genom att dra in den i sprutan efter injektion.



### Fördelar

#### Konstruktion för säkerhet

- \* Fingrar befinner sig bakom kanylen hela tiden.
- \* Visuell och akustisk bekräftelse på säkerhetsaktiveringen.
- \* Hörbart "klick" bekräftar att kanylen är helt indragen och låst inuti spruthylsan.

#### Exklusiv patenterad metod för "NO GAP" konstruktion

- \* Hjälper till att förhindra oavsiktlig aktivering av indragningsmekanismen av kanylen.
- \* Enklare att göra beredning utan oavsiktlig aktivering av säkerhetsmekanismen.
- \* Enklare att ta bort luftbubblor.

#### Enkelt handhavande

- \* Minimal förändring av tekniken.
- \* Enhandsfattning.
- \* Ingen säkerhetsdetalj är applicerad på kanylen - möjliggör låg injektionsvinkel.

#### Patientvård

- \* Möjligt att byta kanyl för att undvika återanvändning som kan orsaka oskarp kanyl och därmed smärta.
- \* Kolv med specialkonstruerad spets för att reducera "dead space".

#### Effektivt val

- \* Kontrollerad indragning av kanylen - inget blodspill efter aktivering.
- \* Luer lock konstruktion - passar alla standard injektionskanyler.
- \* Tar litet utrymme i avfallsbehållare, en potential för att minska avfallskostnad.




## Produktlista

Art. nr.	Benämning	Kanylstorlek
100075IM	SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	21Gx1"
100072IM	SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	21Gx1 1/2"
100064IM	SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	23Gx1 1/4"
100079IM	SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	25Gx1"
100077IM	SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	23Gx1"
100066IM	SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	23Gx1 1/2"
100085IM	SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	22Gx1"
100076IM	SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	22Gx1 1/2"
120006IM	SOL-CARE™ 3ml Luer Lock säkerhetsspruta	—
140075IM	SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	21Gx1"
140085IM	SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	22Gx1"
140076IM	SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	22Gx1 1/2"
140072IM	SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	21Gx1 1/2"
140077IM	SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	23Gx1"
140065IM	SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	23Gx1 1/4"
120007IM	SOL-CARE™ 5ml Luer Lock säkerhetsspruta	—
160075IM	SOL-CARE™ 10ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	21Gx1"
160085IM	SOL-CARE™ 10ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	22Gx1"
160072IM	SOL-CARE™ 10ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	21Gx1 1/2"
160076IM	SOL-CARE™ 10ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	22Gx1 1/2"
120008IM	SOL-CARE™ 10ml Luer Lock säkerhetsspruta	—
190075IM	SOL-CARE™ 20ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	21Gx1"
190085IM	SOL-CARE™ 20ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	22Gx1"
190061IM	SOL-CARE™ 20ml Luer Lock säkerhetsspruta med avtagbar kanyl	21Gx1 1/2"
120009IM	SOL-CARE™ 20ml Luer Lock säkerhetsspruta	—

För andra kanylstorlekar kontakta [info@medcore.se](mailto:info@medcore.se)

## Bara tre steg för att nå säkerhet :

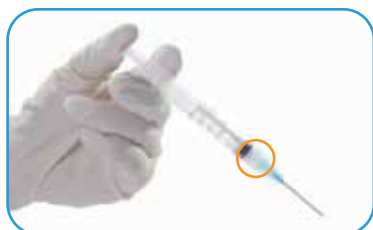

**TRYCK**



**DRA**



**BRYT**