


Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Draglakan

Art nr: 5090140G

Qorpus Vita 4-vägs gliddraglakan grått är ett bra hjälpmedel för vårdpersonal för att förflytta och positionera brukare. Tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan möjliggörs förflyttningen både i sidled och upp och ned i säng. Mångårig erfarenhet från vårdsektorn visar att användning av glidlakan minskar risken för trycksador.

Gliddraglakanet är ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal. Belastningen på ryggar och axlar minskar. Glidytans låga friktion gör att vändning av patient kan utföras på ett kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten.

OBS! Produkten får ej användas till att lyfta brukaren med.

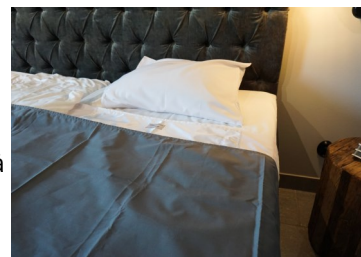

Benämning	Qorpus Vita 4-vägs gliddraglakan, grått
Varumärke	Qorpus Vita
Art nr	5090140G
Totalyta	B220 x L140 cm
Glidyta	B146 x L140 cm
Till sängbredd	90-120 cm
Färg	Grått
Antal produkter/förpackning	1 st
Material	Polyester/Bomull
Liggyta/Bäddflikar	Polyester
Glidyta	Polyester
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 200 st
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Produkten får inte användas till att lyfta brukare med eller tillsammans med en lift. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Max: 220 kg

Max brukarvikt




Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produk-



Art nr 5090140G

Användaranvisning

- Bädda ett Qorpus Vita Glidlakan i sängen med glidytan vänd uppåt. Glidlakanet fixeras i sängen med hjälp av vingarna och bäddas in med ca 10-12cm.
- Placera gliddraglakanet ovanpå det nerbäddade glidlakanet med glidytan vänd neråt så att glidytorna möts.
- Med ett stadigt tag i draglakanet förflyttar man brukaren i sidled eller upp-ned i säng.
- När positioneringen är klar skall alltid draglakanet bäddas fast runt madrassen. Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas!
- Brukaren ska ligga direkt på draglakanet – inget ytterligare lakan behövs.
- Produkterna är märkta med vilken sida produkten skall bäddas i säng för rätt funktion och säkerhet.

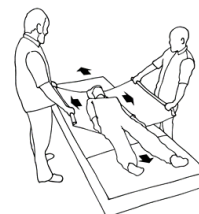

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240