

Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel • Tvättbara inkontinensskydd


Art.nr: 6420, 6421, 6422, 6423,  
6424, 6425, 6426

**Sanifix absorberande trosa** är en tvättbar absorberande flergångsbyxa för vuxna. Byxan är av bomull med hög kapacitet vid droppinkontinens och ett bra alternativ till engångsprodukter. Byxan har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet. Produkten har ett spärrskikt som förhindrar genomvättning. Byxan passar bra till personer som har droppinkontinens och som är allmänt "plockiga" av sig och på så sätt tar sönder ett engångsskydd (t ex dementa). Produkten kan på så sätt göra det möjligt att fortfarande klara toalettbesöken själva utan att riskera läckage. Produkten passar även bra för de som är känsliga för klister. Klarar ca 100 tvättar, 60°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Kan torktumlas på låg värme.



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande trosa						
Art nr	6420	6421	6422	6423	6424	6425	6426
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	68-92 cm	72-98 cm	78-104 cm	80-108 cm	88-112 cm	90-118 cm	92-120 cm
Mått midja	58-80 cm	60-90 cm	66-95 cm	70-100 cm	74-108 cm	80-112 cm	88-120 cm
Mått benöppning	44-60 cm	46-65 cm	50-70 cm	52-75 cm	54-80 cm	56-85 cm	60-90 cm
Vikt/produkt	36 g	42 g	47 g	48 g	51 g	53 g	66 g
Teoretisk abs.kap. ISO 11948-1 ml	200 ml						
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	66,6 ml						
Färg	Vit						
Antal/förpackning	1 st						
Material	Byxan Absorptionsskikt Spärrskikt						
	95 % Bomull, 5 % Spandex 70 % Viskos, 30 % Polyester Polyuretan						
Krympning	<5 %						
Antal tvättar	Ca 100 st (normal hushållstvätt)						
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.						
Förvaring	Rumstemperatur						
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.						

#### Symboler:

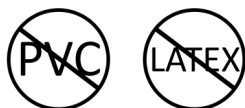

Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art.nr. 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426

#### Användaranvisning

- Produkten har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet.
- Storleken mäts runt midjan.
- Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion.
- Vid tvätt tvättas hela produkten inklusive ilägg..
- Tvätta produkten före användning för att aktivera absorptionsförmågan.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



# SWERECO



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240