

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Lakansskydd

Art nr: 1169-S, 1169-M, 1169-L,  
12221-S, 12221-M, 12221-L,  
1168-S, 1168-M, 1168-L

Vårt bassortiment av lakansskydd består av tre olika lakansskydd som i sin tur har tre olika storlekar. Ett lakansskydd är till för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck. Bädda alltid in bäddflikarna under sängen för bästa komfort och säkerhet.



| Varumärke                                       | Absorba  |               |               |   |                |                |   |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---------------|
| Benämning                                       | Absorba Lakansskydd Eldner   |               |               | Absorba Lakansskydd Brage                             |                |                | Absorba Lakansskydd Lina                  |               |               |
| Lakansskyddets egenskaper                       | Lakansskydd som är bra för små läckage, ett all-around skydd                         |               |               | Lakansskydd som är bra för medium till större läckage |                |                | Lakansskydd som är bra för större läckage |               |               |
| Art nr  | <b>1169-S</b>  | <b>1169-M</b> | <b>1169-L</b> | <b>12221-S</b>  | <b>12221-M</b> | <b>12221-L</b> | <b>1168-S</b>                             | <b>1168-M</b> | <b>1168-L</b> |
| Totalyta (BxL)                                  | 190 x L85 cm   | 215 x 85 cm   | 250 x 85 cm   | 190 x 85 cm   | 215 x 85 cm    | 250 x 85 cm    | 190 x 85 cm                               | 215 x 85 cm   | 250 x 85 cm   |
| Absorberande yta (BxL)                          | 90 x 85 cm   | 115 x 85 cm   | 150 x 85 cm   | 90 x L85 cm   | 115 x 85 cm    | 150 x 85 cm    | 90 x 85 cm                                | 115 x 85 cm   | 150 x 85 cm   |
| Sängbredd                                       | 80-105 cm  | 110-120 cm    | 140-160 cm    | 80-105 cm   | 110-120 cm     | 140-160 cm     | 80-105 cm                                 | 110-120 cm    | 140-160 cm    |
| Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015     | 1537 ml (+/- 43 ml)  |               |               | 1668 ml (+/- 49 ml)                                   |                |                | 1782 ml (+/- 56 ml)                       |               |               |
| Material liggyta                                | 50% Bomull, 50% Polyester  |               |               | 100% Polyester  |                |                | 100% Bomull                               |               |               |
| Material  | Absorptionsskikt<br>Spärrskikt<br>Bäddflikar<br>Undersidan                           |               |               |   |                |                |   |               |               |
|   | 95% Polyester, 5% Rayon<br>Polyuretan<br>50% Polyester, 50% Bomull<br>100% Polyester |               |               |   |                |                |   |               |               |
| Antal produkter/förpackning                     | 1 st   |               |               |   |                |                |   |               |               |
| Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt) | Ca 450 st  |               |               |   |                |                |   |               |               |
| Kasseras  | Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning               |               |               |   |                |                |   |               |               |
| Förvaring                                       | Rumstemperatur   |               |               |   |                |                |   |               |               |
| Övrig information                               | Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.       |               |               |   |                |                |   |               |               |

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Lakansskydd


Art nr: 1169-S, 1169-M, 1169-L,  
12221-S, 12221-M, 12221-L,  
1168-S, 1168-M, 1168-L

## Användaranvisning

- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med Sanicare loggan mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används
- Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens bredd.

Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!

## Symboler:

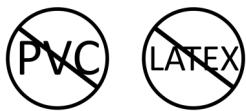

Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 1169-S, 1169-M,  
1169-L, 12221-S, 12221-M,  
12221-L, 1168.S, 1168-M,  
1168-L



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Det finns en risk för att brukaren kan falla ur sängen om en förflyttning ändå görs! Bädda alltid in bäddflikarna. Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



\*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda