


ORTHO

FOTLEDSORTOS AEQUI

Storlek	Omkrets
1	27 - 31
2	31 - 34
3	34 - 40

Utförande: vänster och höger

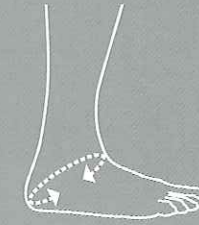

Push Aequi är en effektiv fotledsortos som ger en balans mellan effektivt mekaniskt stöd för den skadade fotleden och komfortabel användning. Det styva stödet är helt placerat på fotledens innersida och har en utskärning för fotknölen. Den laterala sidan är tillverkad i formskum, vilket enkelt anpassas till individuell anatomi. Ortosen spänns fast med hjälp av ett diagonalt band. De elastiska banden applicerar tryck runt fotleden.

Push Aequi kan användas i funktionell behandling av fotledsskador och som ett långtidsstöd vid kronisk fotledsinstabilitet. Inversions-/eversionsrörelse begränsas medan plantar/dorsal flexion tillåter tillräcklig frihet. Det innebär att ingen inhibition känns under normalt gående eller springande. Push Aequi används utanför strumpan, och optimal stabilisering kan endast erhållas om det bärs med sluten (knoten) sko.



INDIKATIONER

Allvarlig (kvarvarande) instabilitet (under hög belastning)

Behandling av akut lateral fotledbandsskada

Uppföljningsbehandling av konservativ eller opererad fotledsfraktur

Artros med instabilitet utan vätskeansamling

Sekundärt förebyggande av fotledbandsskada (under hög belastning utan vätskeansamling)