Kulan, duschstol och duschpall

Artnr: 142113,142114,142117,142118,142137,141630, 141631, 141623

Avsedd användning: Duschstol/duschpall är avsedda som hjälpmedel vid duschning och tvagning för personer med nedsatt rörelseförmåga. Produkterna är konstruerade för användning i våtutrymmen och ger brukaren en sittplats vid personlig hygien.

Produktvarianter

Modell	Art.nr	Höjd (cm)	Vikt (kg)	Max Brukarvikt (kg)
Duschstol Kulan, ställbar	142113	46-56	4,4	150*
Duschstol Kulan, ställbar, intim	142114	46-56	4,3	150*
Duschstol Kulan, ställbar, med ryggstöd	142117	46-56	4,8	150*
Duschstol Kulan, ställbar, intim, med ryggstöd	142118	46-56	4,8	150*
Duschstol Kulan, ställbar, med ryggstöd, låg	142137	35-45	4,6	150*
Duschpall Kulan, ställbar	141630	45-55	3,2	150
Duschpall Kulan, ställbar, intim	141631	45-55	3,2	150
Duschpall Kulan, låg**	141623	20	3,3	150

*Max brukarvikt 130 kg när mjukrygg (Art.nr 142125) används.
**Duschpall Kulan, låg har fast höjd och saknar förlängarben. Anvisningar om förlängarben och clips gäller inte denna modell.

Tillbehör
Ryggstöd, hårt, till duschstol (Art.nr 142120)
Mjukrygg till duschstol (Art.nr 142125). Om stolen har hårt ryggstöd behövs 2 st Kulan handtag (Art.nr 120705).
Mjuksits Kulan, hel sits (Art.nr 142121)***
Mjuksits Kulan, intimsits (Art.nr 142122)***

Reservdelar
Stödfot 18 mm (Art.nr 120690)
Kula/handtag 22 mm (Art.nr 120705)
Sits Kulan, hel sits (Art.nr 142128)
Sits Kulan, intimsits (Art.nr 142129)
Clips 25 mm (Art.nr 14420213)
Clipshållare (Art.nr 14211305)
Förlängarpåse 350 mm, 4 ben inkl. clips (Art.nr 14211320-S)
Ben med ställbar fot (Art.nr 14211313-S)

Teknisk data
- Mått (alla modeller): bredd sits 43 cm, djup sits 40 cm, totalbredd 57 cm.
- Höjd armstöd (duschstol): 17 cm.
- Material: pulverlackerat stål (stativ), aluminiumrör (förlängarben), PE (sits och rygg), TPE (stödfötter). Produkten innehåller inte PVC eller latex.
- Förväntad livslängd är 5 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning. Livslängden kan förlängas genom regelbunden inspektion och underhåll utfört av behörig personal.
- Förvaring: förvara produkten i rumstemperatur.
- Återvinning och avfall: produkten återvinns som metallskrot och plastavfall, komponenter sorteras efter lokal anvisning.

***Markerade artiklar är konsumentprodukter och är inte klassificerade som medicintekniska produkter



Duschstol Kulan, ställbar



Duschstol Kulan, med ryggstöd



Duschpall Kulan, ställbar



Duschpall Kulan, intim

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-47 ver 01
Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik. https://www.swereco.com/hjalpmedel-i-hemmet/bad-dusch/stolar-pallar

Säkerhetsanvisningar

⚠ Produkten får endast användas enligt avsedd användning. Inga egna anpassningar av produkten får göras, t.ex. att hänga upp hållare för schampo eller tvål.

⚠ Vid tecken på slitage eller skada på produkten får den inte användas. Kontrollera regelbundet att clipsen är hela och ordentligt intryckta och att förlängarbenen inte är skadade. Trasiga clips kan medföra en allvarlig risk om förlängarbenet inte sitter ordentligt. Om skador upptäcks ska clipsen alltid bytas ut innan produkten får användas igen.

⚠ Innan produkten tas i bruk ska brukarens fysiska och kognitiva förmåga samt brukarmiljön riskbedömas av förskrivaren, inklusive behovet av ryggstöd. Nedsatt kognition, balans eller muskeltonus kan påverka användningen och medföra säkerhetsrisker.

⚠ Förskrivaren ska göra regelbundna riskbedömningar för att säkerställa att produkten är fortsatt lämplig för brukaren över tid. Produkten är ej avsedd att användas i badkar.

⚠ Produkten får inte flyttas med brukaren sittande på den, då benen kan vika sig eller skadas.

⚠ Produkten ska belastas jämnt på båda sidor (tipprisk). Duschstol: Ta stöd mot båda armstöden vid uppresning.

⚠ Produkten får inte användas utan stödfötter, då den kan glida och bli instabil.

⚠ Max brukarvikt är 150 kg (130 kg när mjukrygg används). Den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.

Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Användaranvisning

Om du är osäker på installationen eller har frågor, kontakta förskrivare, återförsäljare eller Swerecos kundsupport för hjälp.

- Montering av sits: placera sitsen på stativet och tryck ned den tills ett klickljud hörs.
- Justering av höjd: ta bort clipset från benet för hand genom att dra det rakt ut, justera till rätt höjd och tryck sedan fast clipset igen, se figur 1. **Observera att inga verktyg får användas vid borttagning av clips.**
- Säkerställ att clipset är ordentligt intryckt före användning. När clipset är på plats hörs ett klickljud.
- Alla fyra förlängarben ska vara inställda på samma höjd, med undantag för framåtlutat läge enligt nedan.
- Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade/utslitna stödfötter ska bytas ut mot nya.
- Produkten ska placeras på ett plant underlag så att alla fyra ben står stadigt mot golvet. Ta hänsyn till golvets lutning mot golvbrunnen. Kontrollera att produkten står stabilt innan brukaren sätter sig.
- Gäller duschstol: Coxit-ställning (framåtlutad sits) är tillåten, men de främre förlängarbenen får vara maximalt ett hål lägre än de bakre benen, se figur 2.

Monteringsanvisning för ryggstöd

- Hårt ryggstöd: ta bort kulorna från de bakre rören. Skjut ryggstödet ca 6 cm ned på rören, till stoppet. Var noga med att hålla ryggstödet vågrätt.
- Mjukrygg: kulorna ska alltid sitta på de bakre rören när mjukrygg används. Byts ett hårt ryggstöd mot mjukrygg ska 2 st kulor (Art.nr 120705) monteras på rören. Rören får aldrig lämnas öppna upptill.

Rengöring och rekonditionering


- Rengör produkten regelbundet med mild tvållösning (pH 5–9) och mjuk trasa, så att smuts och tvål-/schamporester som kan ge halkrisk tas bort. Sitsen tas enkelt bort vid rengöring. Undvik starka kemikalier eller lösningsmedel då det kan skada produkten. Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.
- Clips och stödfötter bör ersättas med nya i samband med genomförd rekonditionering av produkten.
- Produkter som rekonditioneras ska inkludera en fullständig kontroll enligt underhållsinstruktionen nedan.

Underhåll


Kontrollera regelbundet att:

- Produkten är stabil.
- Clipsen och clipshållarna är hela. Vid byte av clips, säkerställ att det är rätt modell (flera storlekar finns).
- Förlängarbenen inte är skadade och att höjdjusteringen inte glappar.
- Stödfötterna inte är slitna eller skadade. En sliten eller skadad stödfot ska bytas ut.
- Kulorna sitter på plats på rören.
- Inga sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage har uppstått på produkten, t.ex. på sitsen. Hittas sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage ska produkten tas ur bruk.

1

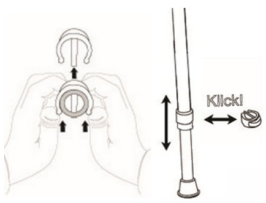

2

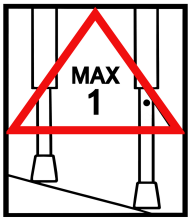

LOT	Produktens partinummer	CE	Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745	MD	Produkten är en medicinteknisk produkt
	Produktens utgångsdatum		Konsultera bruksanvisning		Tillverkare
REF	Produktens artikelnummer		Maximal brukarvikt		Varning

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-47 ver 01
Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik. https://www.swereco.com/hjalpmedel-i-hemmet/bad-dusch/stolar-pallar